

PatSim 200

Quick Start Guide
Kurzbedienungsanleitung
Guide D'Utilisation Rapide
Guía De Inicio Rápido
快速入门指南
Szybki Start



Warning of electrical danger!
Warnung vor elektrischer Gefahr!
Avertissement: Danger électrique!
Advertencia de riesgo eléctrico
警告电气危险!
Ryzyko porażenia elektrycznego!



Important, follow the documentation!
Wichtig, Anweisungen befolgen!
Important, suivez la documentation!
Importante, ¡Siga la documentación!
重要事项, 参照文档!
Ważne, postępuj zgodnie z dokumentacją!




Register your PatSim + 5 year warranty

To register your **PatSim200** and to activate your 5 year warranty please go to Rigelmedical.com/5years


1

In the box

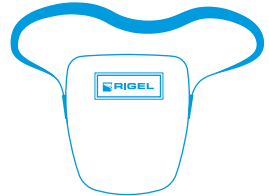

2

Getting to know your PatSim

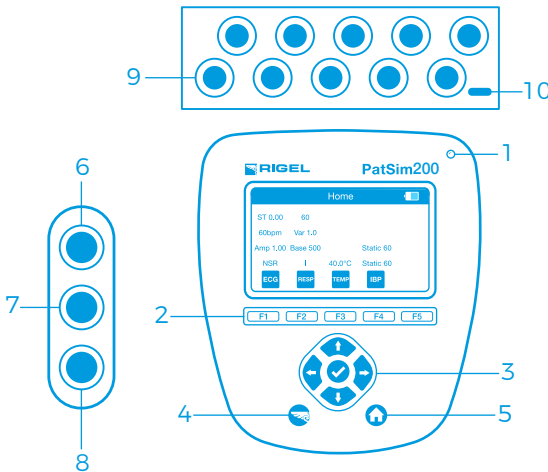


- 1- Charging LED status
- 2- Function keys F1-5
- 3- Navigation keys
- 4- Rigel key - on/off
- 5- Home screen button
- 6- Temperature output
- 7- IBP1 output
- 8- IBP2 output
- 9- Universal ECG connections x10
- 10- Micro USB power input

3



Charging your PatSim



4 Switching on/off

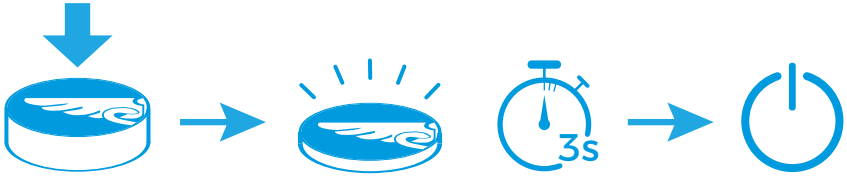


5 Simulation menu

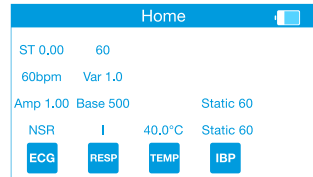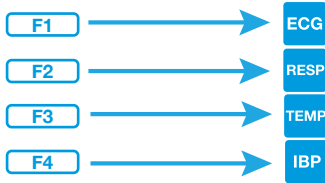


6 Favourite simulations


Save:

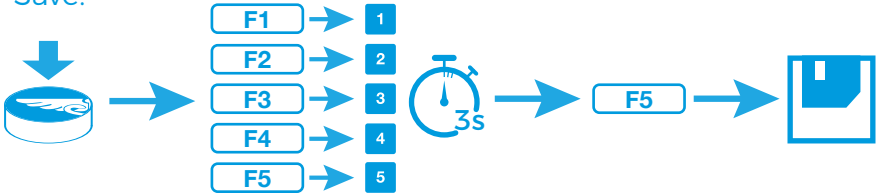

Recall:

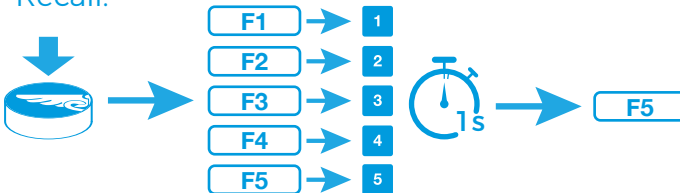

7 Settings menu

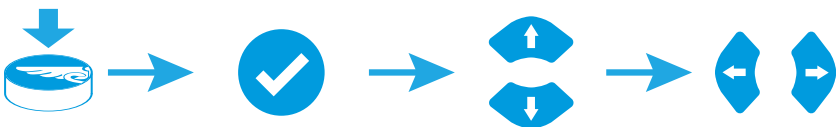



Translations / Übersetzung / Traductions / Traducciones 翻译 / Tłumaczenia

- 1- LED-Ladestatus
- 2- Funktionstasten F1-5
- 3- Navigationstasten
- 4- Rigel-Taste - ein/aus
- 5- Home-Bildschirmtaste
- 6- Temperatursausgabe
- 7- IBP1-Ausgabe
- 8- IBP2-Ausgabe
- 9- Micro USB-Stromeingang
- 10- 10 Universal-EKG-Anschlüsse

- 1- Voyant état de charge batterie
- 2- Touches de fonction F1 à F5
- 3- Touches de navigation
- 4- Touche Rigel - marche/arrêt
- 5- Touche écran Accueil
- 6- Sortie température
- 7- Sortie IBP1
- 8- Sortie IBP2
- 9- Prise d'alimentation micro USB
- 10- 10 connexions universelles ECC

- 1- LED de estado en carga
- 2- Teclas de función F1-F5
- 3- Teclas de navegación
- 4- Tecla Rigel on/off
- 5- Botón de pantalla de inicio
- 6- Salida de temperatura
- 7- Salida IBP1
- 8- Salida IBP2
- 9- Entrada de alimentación micro USB
- 10- 10 conexiones universales para ECC

- 1- 充电状态 LED
- 2- 功能键 F1-5
- 3- 导航键
- 4- Rigel 键
- 5- 主屏幕按钮
- 6- 温度输出接口
- 7- IBP1 输出接口
- 8- IBP2 输出接口
- 9- Micro USB 电源输入接口
- 10- 10 个通用 ECC 接口

- 1- Dioda statusu ładowania
- 2- Klawisze funkcyjne F1-5
- 3- Klawisze nawigacyjne
- 4- Klawisz Rigel On/Off
- 5- Klawisz DOM
- 6- Wyjście temperatury
- 7- Wyjście IBP1
- 8- Wyjście IBP2
- 9- Wejście zasilania mikro USB
- 10- Uniwersalne przyłącza EKG x10

Sales and Delivery enquiries
Für Sales und Lieferung
Ventes et Livraison
Preguntas de Ventas y Envíos
销售和交付咨询
Sprzedaż i dostawa

Email: sales@rigelmedical.com
Tel: +44 (0) 191 586 3511
Fax: +44 (0) 191 586 0227

Technical enquiries
Technische Fragen
Questions techniques
Preguntas Técnicas
技术咨询
Wsparcie techniczne

Email: support@rigelmedical.com
Tel: +44 (0) 191 586 3511
USA office: +1 813 886 2775

Service, Calibration and Repair
Service, Kalibration und Reparatur
Service, Calibration et Reparation
Servicio Técnico, Calibración, y Reparaciones
服务, 校准和维修
Serwis, wzorcowanie i naprawa

Email: service@calibrationhouse.com
Tel: +44 (0) 191 587 8739 Fax: +44 (0) 191 518 4666
USA office: +1 813 886 2775